BNET 1<sup>st</sup>: General aspects of neuroendovascular approaches

일시: 2022년 3월 5일(토)

장소: 대웅제약본사 별관 베어홀 (지하1층)

(서울 강남구 봉은사로 114길 12)

주최: 대한뇌혈관내치료의학회

주관: 대한신경외과학연구재단





### 회원 여러분 안녕하십니까?

2020년에 시작된 Basic NeuroEndovascular Training Course (BNET Course)를 2022년에도 이어가려고 합니다.

이 분야를 시작한지 얼마 되지 않은 회원님들(전임의 및 Junior staff)을 대상으로 하고 있으므로, 아주 기본적인 내용으로 구성하였습니다.

총 3번의 코스를 계획하고 있으며, 다음과 같이 구성하였습니다.

세 코스 모두 신청 혹은 부분 신청 가능합니다.

- 1. General aspects of neuroendovascular approaches
- 2. Aneurysmal coiling
- 3. Carotid stenting and Mechanical thrombectomy

병원 업무로 바쁘시겠지만, 이번 베이직 코스에 꼭 참여하여 지식을 습득하고 기본 술기를 향상 시키는 계기가 되기를 기원합니다.

감사합니다.

2022년 3월 5일 대한뇌혈관내치료의학회 회장 장철훈 부회장 권순찬 총무이사 김영우 수련교육이사 김태곤, 박중철



# PROGRAM ....

일시: 2022년 3월 5일(토)

장소 : 대웅제약본사 별관 베어홀

08:30-08:50	Registration		
00.50 00.00	Course Introduction	박중철	울산대 서울아산병원
08:50-09:00	Welcome Address	강철훈	KoNES 회장
09:00-09:30	Endovascular suite: Angiography Equipment and Frame rate	김태곤	차의과학대 분당차병원 O7
09:30-10:00	Angiographical Contrast Media	김정재	이화여대 서울병원 21
10:00-10:30	Angiographical Devices-sheath, guiding catheter, intermediate catheter, guiding wire, microcatheter, microwire, etc	김소연	가톨릭관동대 국제성모병원 25
10:30-11:00	Performing cerebral angiography and related cerebral arterial anatomy	신동성	순천향대 부천병원 37
11:00-11:30	Closing devices and techniques	유민욱	창원파티마병원 47
11:30-12:00	Lunch		
12:00-13:00	Hands-on		All
	Closing & Photo time	김영우	KoNES 총무이사



# Endovascular suite: Angiography Equipment and Frame rate

김 **태 곤** 차의과학대 분당차병원



# Understanding of Endovascular suite & Devices

: Angiography Equipment, Contrast, Devices, etc.

Tae Gon Kim, M.D.

Vice-President, Director of Big Data Center, Director of Cerebrovascular Center, Chief & Head professor of Neurosurgery department, Bundang CHA Medical Center CHA University, School of Medicine

이 보고 이 보고 이 보고 하는데 보고 보고 있다.

#### **Angiography Equipment**

- Since the discovery of X-rays in 1895, technology using them has developed very rapidly, with minimally invasive angiography and endovascular intervention at the apex of this application.
- The cerebral angiography and endovascular interventions using X-rays are very routine procedures, and for good imaging and better results, it's important to be familiar with angiography machine based on X-rays.
- In this chapter, the technologies on the angiographic imaging system, including C-arm, foot switch, monitor console, table and control panel and other imaging techniques such as pulsed fluoroscopy, digital subtraction angiography, collimation, etc will be introduced.

#### **Angiography Equipment**

- Interventional suites may be equipped
  - : a stationary fluoroscopic imaging system
  - : a mobile fluoroscopic imaging system
- The common features of these systems
  - : a C-arm
  - : an angiographic procedure table
- : console or computer system (to process and project the images for viewing on a screen)







#### **Angiography Equipment**

- · C-arms
- : consists of a C shaped metal mount equipped with an X-ray generator at one end and an X-ray receptor(Detector) at the opposite end of the C-arm.
- Procedure table
  - : The patient is placed on a radiolucent procedure table
  - : between the X-ray tube and the receptor





#### **Angiography Equipment**

- A stationary fluoroscopy system
  - : consists of a ceiling or floor mounted C-arm
- : ceiling mounted monitors
- : floor mounted procedure table
- The entire set up is fully mechanized and the patient is positioned within the fluoroscopy field by either moving the motorized procedure table or the C-arm.
- Stationary system usually has a larger generator that can provide higher image resolution and has the advantage of maximal C-arm mobility for multiple views.













#### **Angiography Equipment**

- A mobile fluoroscopy system
  - : a portable C-arm
- : monitor that can be moved from room to room.
- : The angiographic procedure table is usually stationary and the radiographer manually positions the C-arm over the area of intervention.
- They are generally less expensive and have smaller X- ray generators and lower heat capacity compared to the stationary systems.

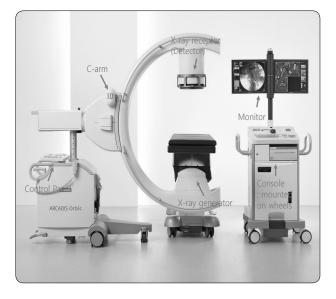

#### C-arm

- An X-ray generator : the x-ray beam is generated
- An X-ray receptor : is captured by the receptor which can be either an image intensifier or a digital flat-panel detector.
  - : higher radiation dose vs lower radiation dose
  - : longer size vs shorter size
  - : lower image quality vs higher image quality
  - : lower cost vs higher cost
  - : more service and parts vs less service and parts
- The current that is required to generate x-rays is measured in milliampere/second (mAs), usually 0.5–5 mA for fluoroscopy
- The current determines the density of the image.

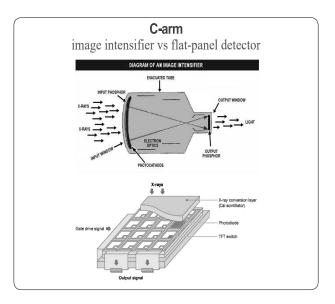



#### C-arm

- Peak kilo-voltage (kVp), which is a measure of the potential difference across the anode and cathode, determines the maximum kinetic energy of the X-ray beam.
- The kinetic energy of the X-ray beam impacts the penetrability of the X-ray beam and the contrast of the image.
- In an automated system, the interaction between the mAs and kVp is determined by the computer to provide the best image quality at the lowest radiation dose to the patient.








#### **Foot Switch**

- A foot switch control is used to start the generation of X-rays by the C-arm.
- The pedals are programmed to begin imaging using fluoroscopy or digitally subtracted angiography when depressed respectively.

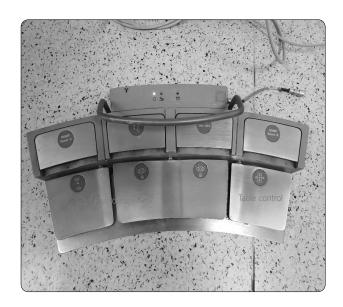





#### **Monitor Console**

- The monitor console usually has two or more computer screens to display the images.
- The screen on the left shows the "active" or "live" images while the one on the right can be used to display the last recorded image frame or replay the image sequences.









#### **Table and Control Panel**

- The procedure table is made of carbon fiber to allow for easy penetration of the X ray beam.
- In the stationary system, along with the control panel located within the control room, another set of control panel can be found on the side of the procedure table.





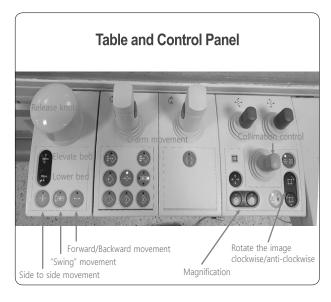

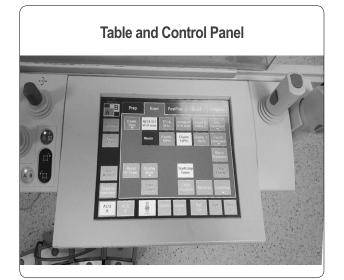














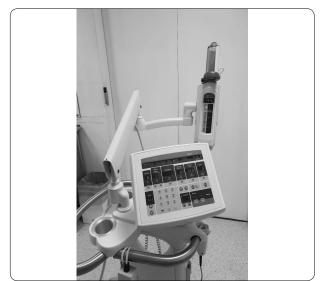















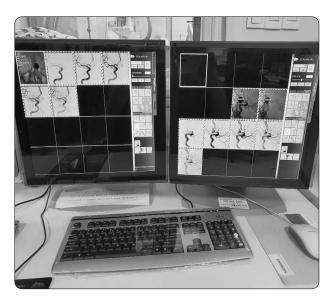

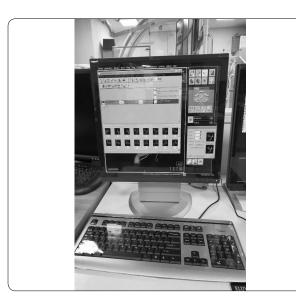




# Imaging Options - Pulsed Fluoroscopy -

- Variable rated pulsed fluoroscopy is an important feature on digital angiographic imaging system.
- In pulsed mode, the X ray beam is not generated continuously but delivered intermittently in synchrony with image display to produce the appearance of a smooth continuous image.
- The use of pulsed fluoroscopy can significantly reduce X-ray dose but "flickering" of images can occur when it is set too low. The default setting in our center is 15 pulses per second although in general.
- The X ray dose at 30 pulses per second is equivalent to that of continuous fluoroscopy.

## Imaging Options - Fluoroscopy vs Digital Subtraction Angiography -


- In standard fluoroscopy, electron dense objects such as bones and iodinated contrast materials absorb more energy and appear white on a black background.
- This is usually reversed digitally such that bone and contrast will appear black on a white background.
- In digital subtraction angiography (DSA), a "mask" of the area of
  interest is first taken and used as a reference to digitally remove or
  subtract the "background" tissues or structures from the images
  that are subsequently acquired during contrast material
  administration. Vessels that are filled with the contrast material
  appear black on a "white out" background. Subtraction
  angiography improves contrast resolution of the image

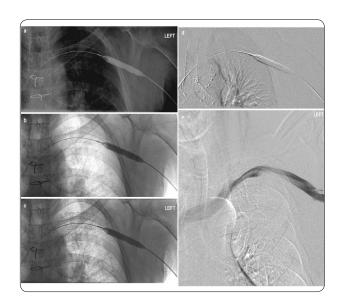






Imaging Options
- Fluoroscopy vs Digital Subtraction Angiography -

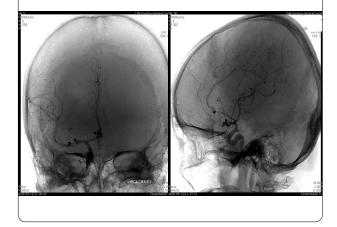

Imaging Options
- Fluoroscopy vs Digital Subtraction Angiography -

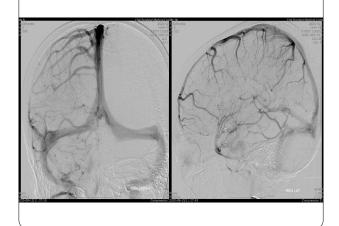

# Imaging Options - Fluoroscopy vs Digital Subtraction Angiography -

- Acquisition of DSA images is described in "frames per second".
- The image acquisition frame rate can be adjusted in accordance to the target vasculature. While a slow acquisition frame rate may not be able to capture the flow of contrast material adequately, a high frame rate may be unnecessary and may result in high radiation dose.
- In general, 4 frames per second is sufficient when imaging the cerebral arteries while 3 frames per second is adequate for hand injection angiography.

# Collimation Versus Magnification Collimated Diverging Converging

#### **Collimation Versus Magnification**

- Collimation is used to limit the size of the field of view to the area of interest.
- It helps to decrease the radiation dose to the patient and improve image quality by reducing scattered radiation.
- Magnification is used to magnify or enlarge the area of interest.
- Magnification results in an increase in the radiation dose to the patient and should be used only when fine detail is needed.

#### **Optimizing Image Quality**

- 1. Minimize the distance between the X-ray detector and the patient. This improves image quality and decreases scatter radiation.
- 2. Remove radio-opaque objects such as oxygen tubing and ECG leads from the field of view
- 3. Minimize patient movements to decrease movement artifacts, e.g., breath holding during imaging of the central veins will help improve image quality
- 4. Position the patient and x ray detector before starting imaging.
- 5. Keep the area of interest in the center of the image

#### **Optimizing Image Quality**


- 6. Use collimation to "remove" unnecessary area.
- 7. Use magnification to see details in a specific area when necessary.
- 8. Increase the number of pulses per second or frames per second where necessary.
- 9. Use full strength iodinated contrast material rather than diluted contrast material, especially when imaging the proximal or central vessels.
- 10. Oblique views may be necessary to delineate overlapping vessels and detecting eccentric vascular disease.

MEMO ///////////////////////////////////

# Angiographical Contrast Media

김 정 재 이화여대 서울병원



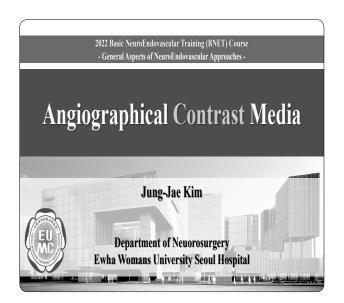

#### **Contrast media**

Substance used to enhance the visibility of structures in the body <u>Attenuation difference of X-ray</u> between objects and surrounding structures

Binding energy of K-shell of Iodine: 33.2KeV

- ≈ mean energy level of polychromatic radiation using general X-ray generators
- → Increasing attenuation compared with surrounding tissue.

EU/NC 이대서울병원

#### **Properties of Contrast media**

- 1. Radio-opacity
- 2. Ionicty
- 3. Solubility
- 4. Viscosity
- 5. Osmolarity
- 6. Binding to serum protein
- 7. Excretion


EU/NC 이대서울병원


#### **Classification of Contrast media**

Based on Ionicity and Molecular Structure

- 1. Ionic monomer (high-osmolar contrast media; HOCM)
- 2. Ionic dimer (low-osmolar contrast media; LOCM)
- 3. Nonionic monomer (LOCM)
- 4. Nonionic dimer (iso-osmolar contrast media; IOCM)

EU/NC 이대서울병원

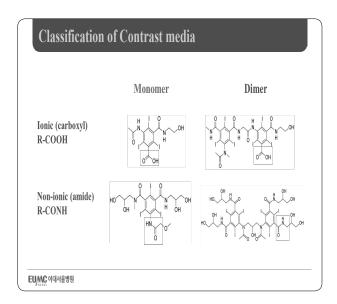

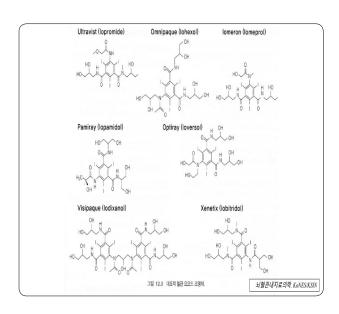

<ol> <li>Immediate reaction</li> <li>1 &lt; 1 hour, 0.7-2%</li> <li>2 Anaphylactoid reaction</li> <li>Delayed reaction</li> </ol>		Symptoms	
	Mild	Nausea/Vomiting Urticaria Itching sense	
	Moderate	Severe vomiting Prominent urticaria Bronchospasm Facial/laryngeal edema Vasovagal syncope	
2. Delayed reaction	Severe	Shock Respiratory arrest Cardiac arrest Seizure	

#### Risk factors for adverse effects

- 1. History of acute adverse effects, anaphylaxis
- 2. History of allergy ( $\geq 4$ ) and asthma
- 3. Cardiac status: angina or congestive heart failure
- 4. Hyperproteinemia (e.g. multiple myeloma)
- 5. Pheochromocytoma
- 6. Sickle cell anemia
- 7. Myasthenia gravis
- 8. Renal insufficiency

EU///C 이대서울병원

#### Premedication for adverse effects

- 1. H1 blockers
- 2. Corticosteroids
  - ① Prednisone 50 mg by mouth at 13 hours, 7 hours, and 1 hour before contrast media injection
  - ② Methylprednisolone (Medrol®) 32 mg by mouth 12 hours and 2 hours before contrast media injection

EU/AC 이대서울병원

#### Contrast-induced nephropathy (CIN)

A sudden deterioration in renal function
Occurs within 72 hours following the IV iodinated contrast medium

- 1) Absolute serum creatinine increase ≥0.5 mg/dL (>44 µmol/L)
- 2) A percentage increase in serum creatinine ≥25% (≥1.25-fold above baseline)
- 11% of hospital acquired renal insufficiency
- 3<sup>rd</sup> most common cause of renal failure (0.6-2.3%)

EU/NC 이대서울병원

#### Kev Points

- New fellows in our room are often nonplussed as to why we only have two CDs for our music system. One of these is "The Greatest Hits of Marty Robbins" and we never play the other one. The point this detail makes is that neuroangiography is safest when practiced in a methodical, repetitive, consistent manner, Every angiogram is executed through the exact same steps, as much as possible. Certainly, there are many days when creativity, ingenuity, and improvisation are in great demand, but these moments are often best avoided and forgotten. The purpose of the music is not entertainment but providing a familiar ambiance. The priority in the room is safety.
- Safe technique can only come about through absolutely consistent practice of safe habits. In most patients, most of the time, such scrupulousness is redundant, but these habits are not aimed at the majority of cases.
   They are aimed at those are, unforeseen circumstances when they will make a big difference.

#### ► REVIEW THE PREVIOUS STUDIES

The importance of this preliminary step cannot be overemphasized. Relying on typed reports of what was seen on the previous studies, which side the findings were on, and the like, is a recipe for oversight, omission, or worse.

- Cerebral angiography는 진단과 치료의 결과 를 본다는 면에서 endovascular procedure의 시작이자 끝이라 생각합니다.
- Complication rate of cerebral angiography:
   Neurologic Cx. 2.63% (19826, 1981-2003, Mayo
  - clinic, Radiology 2007)

     0.30% (3636, 2001–2007, Fifi JT et al. J Vasc Interv Radiol 2009)
- Complication is always painful!!
- Angiography = Safe habits

Pierse Morris, "Practical Neuroangiography", 3rd edition



Angiographical
Devices-sheath,
guiding catheter,
intermediate catheter,
guiding wire,
microcatheter,
microwire, etc

김 소 연 가톨릭관동대 국제성모병원



기톨릭관동대학교 국제성모병원

## **Angiographic devices**

- Guiding catheter to microwire

국제성모병원 김소연



#### 목차

- 1. Basic concepts
- 2. Sheath
- 3. Guiding catheter
- 4. Guidewire
- 5. Intermediate catheter
- 6. Microcatheter
- 7. Microwire



### 1. Basic Concepts

1. Basic Concepts

#### Unit

- · Outer Diameter(OD): French system (Fr)
- Inner Diameter(ID): Inches (inch/")
  - 3 Fr = 1 mm
  - 1 Fr = 0.33 mm

1 mm = 3 Fr = 0.0394 inch = 19 G


- 5 Fr diagnostic catheter (100cm length)
  - 0.066 inch outer diameter (1.65 mm/5Fr)
  - 0.038 ~ 0.45 inch inner diameter (0.97 1.2 mm)
- Guidewire: 0.035 inch (0.89mm) angled tip wire, 150 cm length


french	mm	in	french	mm	in
3	1	0.039	12	4	0.158
4	1.35	0.053	13	4.3	0.170
5	1.67	0.066	14	4.7	0.184
6	2	0.079	15	5	0.197
7	2.3	0.092	16	5.3	0.210
8	2.7	0.105	17	5.7	0.223
9	3	0.118	18	6	0.236
10	3.3	0.131	19	6.3	0.249
11	3.7	0.144	20	6.7	0.263


Aneurysm coiling


	OD	ID
6Fr Guiding	8Fr/6Fr	0.087"
<b>6Fr Intermediate</b>	084"	070"
10 microcatheter	1.7Fr	017"
014 microwire	014"	


• 5Fr Angio catheter

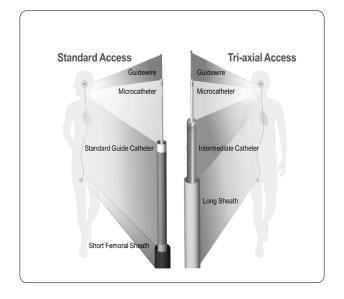


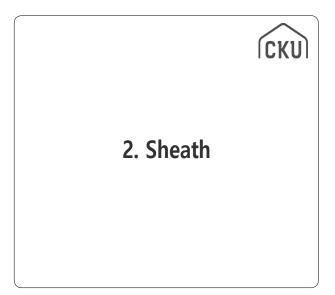


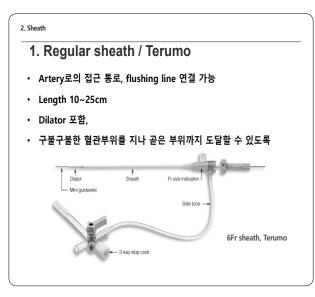

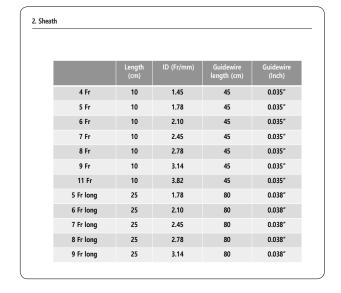

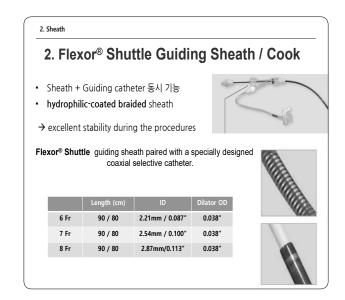


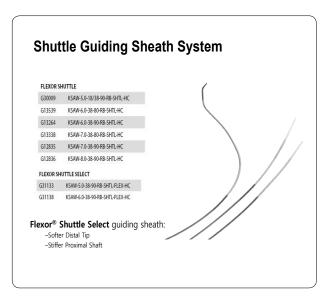


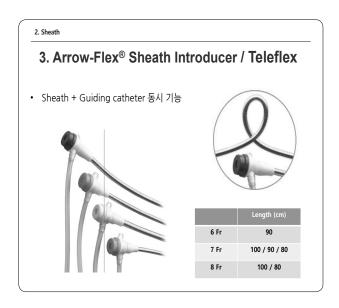




### 3. Guiding catheter

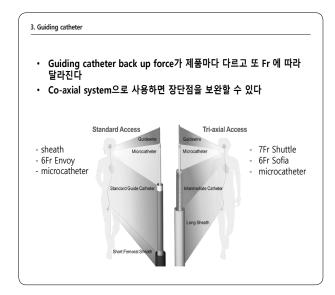


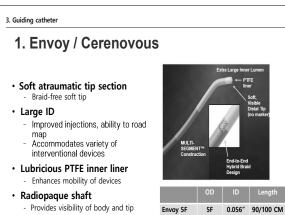

• Four segment construction

Varies firmness and flexibility from hub (stiffest) to tip (softest)

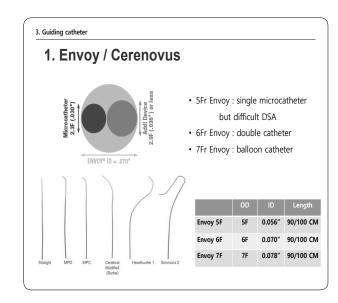

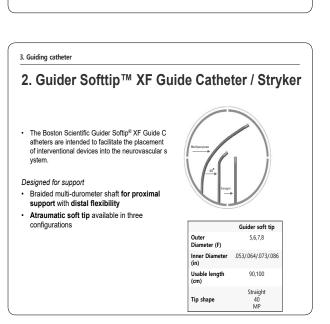



Envoy 6F


6F


0.070" 90/100 CM

0.078" 90/100 CM

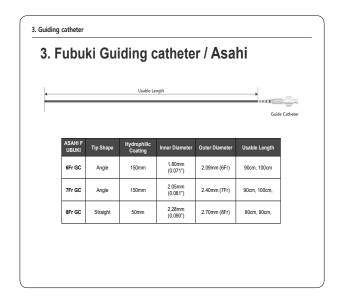

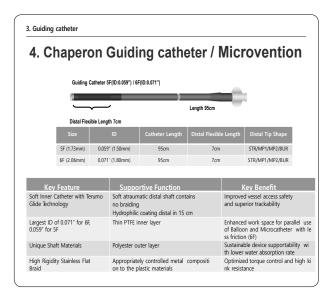


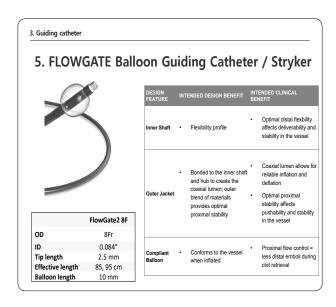

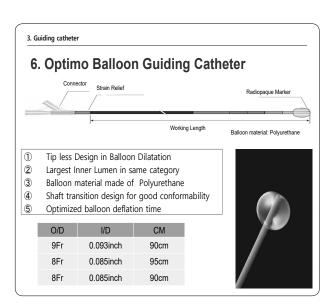




· Hydrophilic coating: smooth, rapid movement · Nitinol or stainless core: resists kinks · Core: torquability and steerability - Stiff 3 Angled 0.035"/0.89mm 150 - Shapable 0.035"/0.89mm 150 STIFF angled - Exchange 0.035"/0.89mm 150 150 Straight 0.035"/0.89mm 0.035"/0.89mm 260 Angled exchange 0.035"/0.89mm

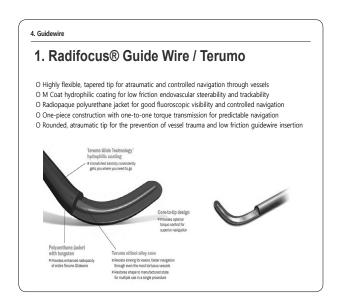








#### 5. Intermediate catheter

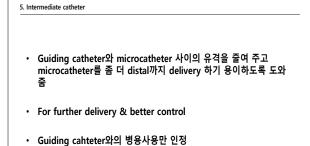



- Intermediate catheter 2개 사용 불가

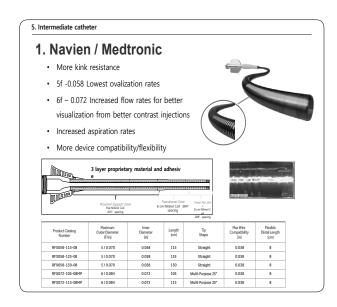


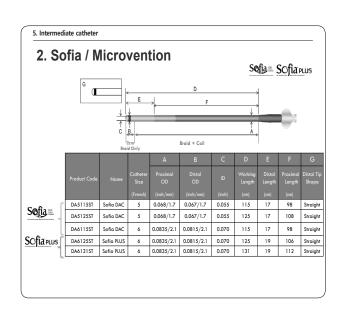


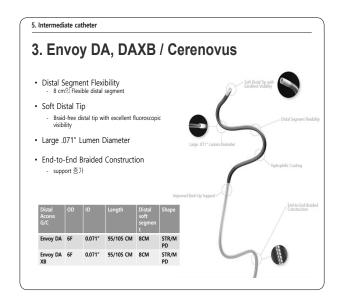

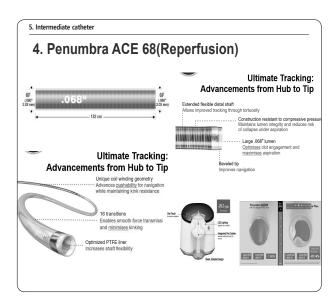


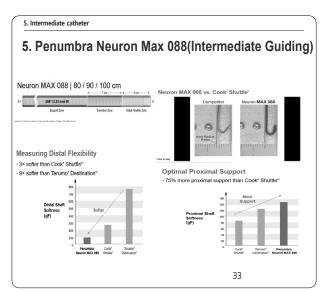


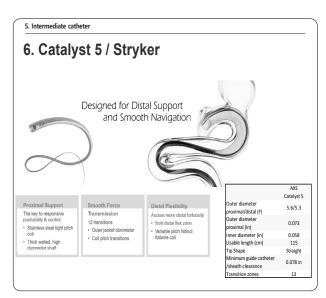


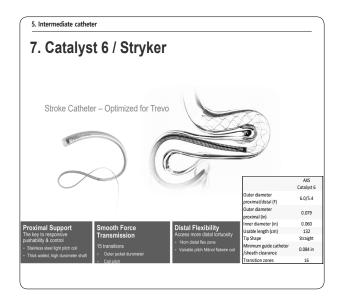





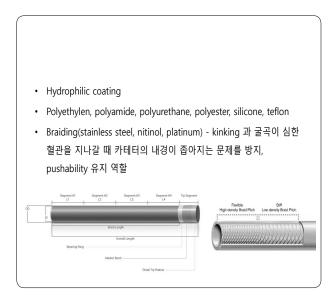


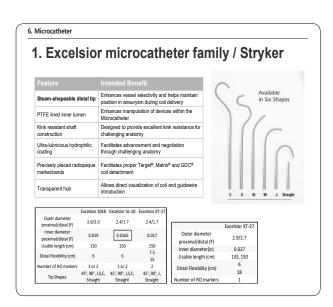


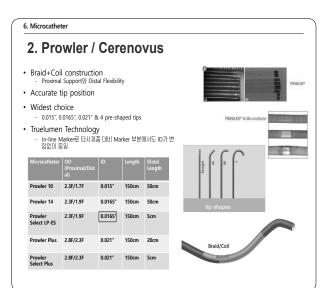


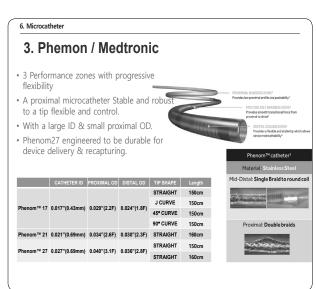


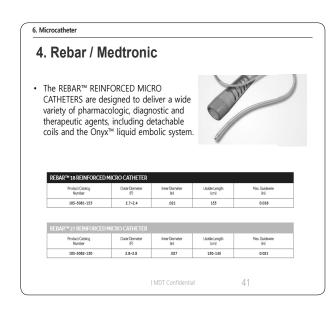


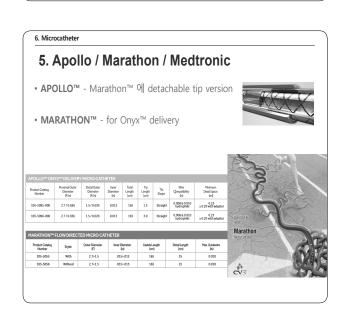


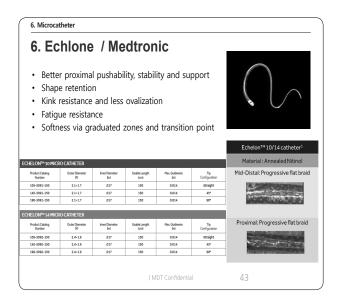


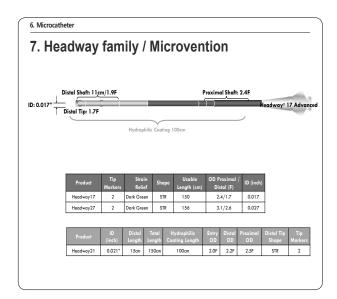


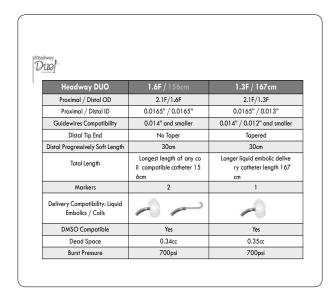


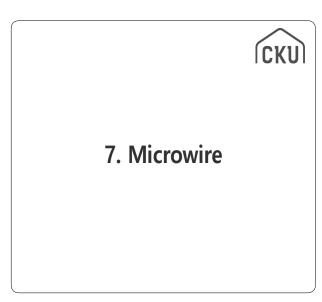


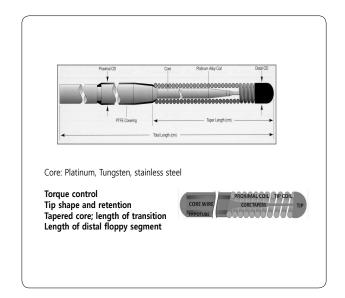

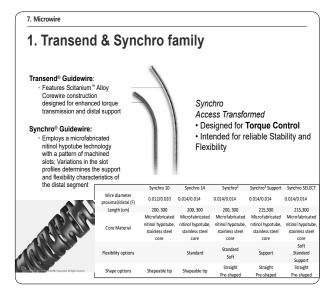

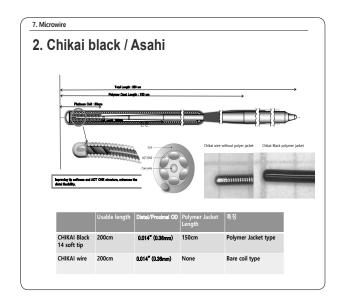

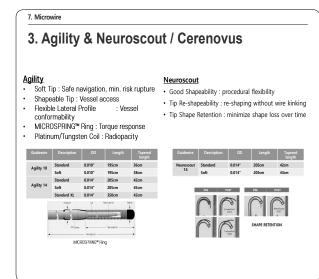

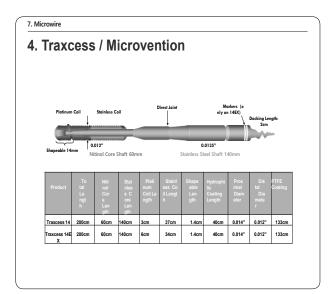





MEMO ///////////////////////////////////


## Performing cerebral angiography and related cerebral arterial anatomy


신 동 성 순천향대 부천병원



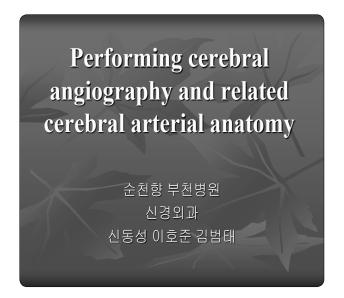


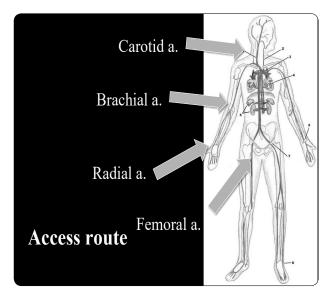


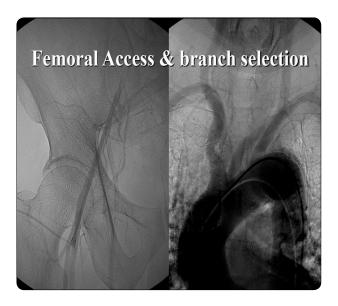


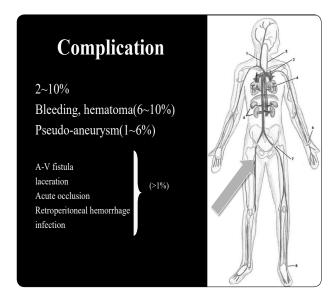





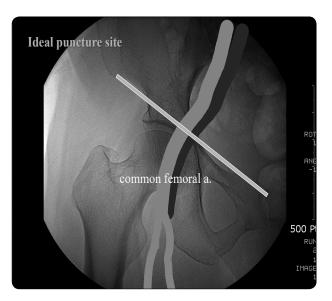


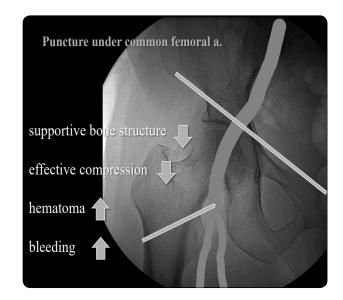


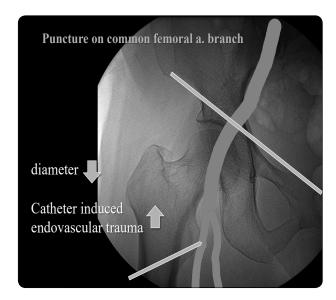


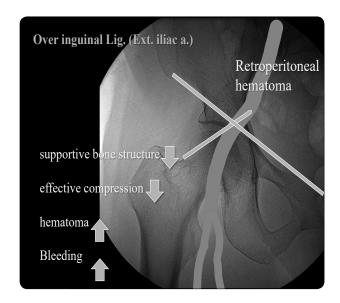


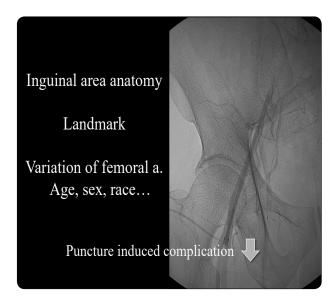


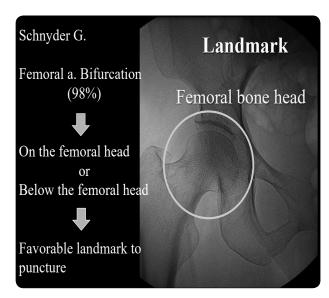


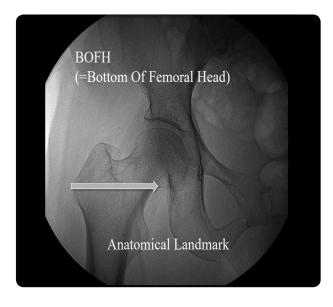


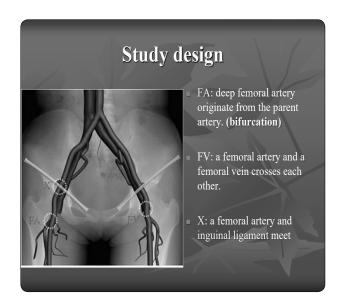


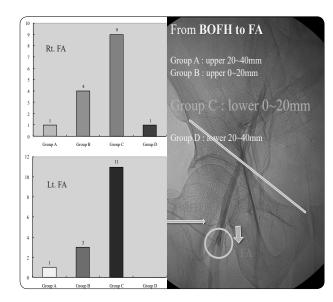

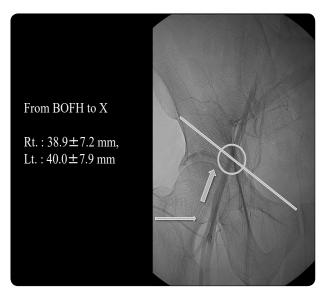

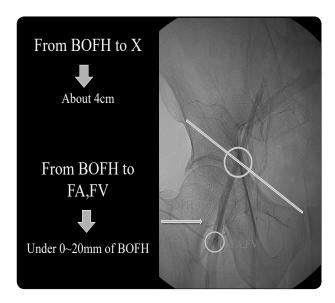

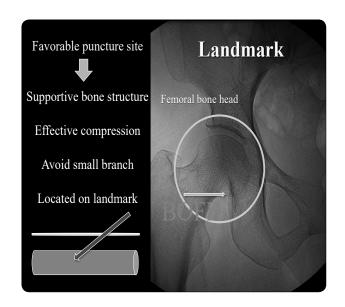

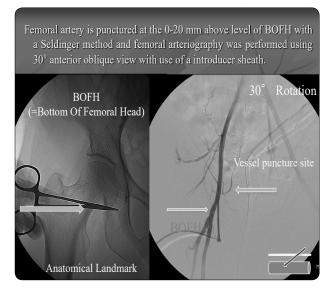



A 5 French catheter is used for a adult and a 4 French is used under the age 10.


The catheter techniques is done as gentle as possible like doing microneurosurgery.


The selective catheterization of the carotids (internal and/or external), vertebral, or subclavian arteries was usually done.



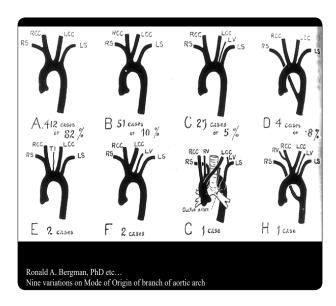


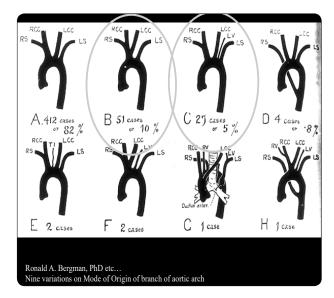


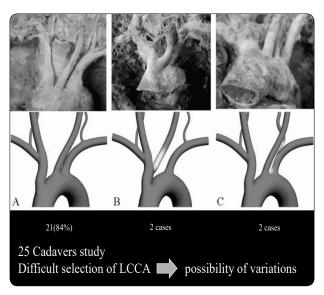


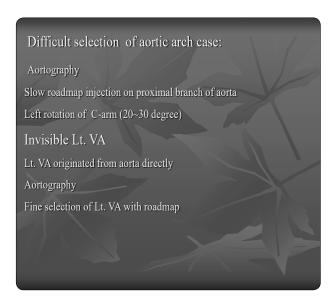




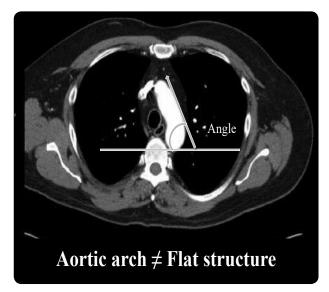


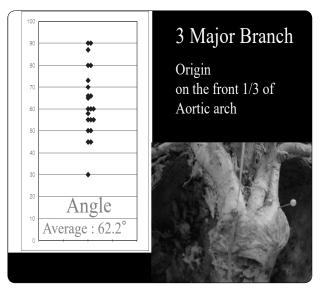


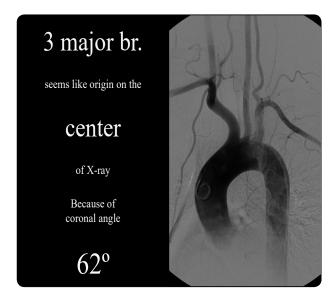





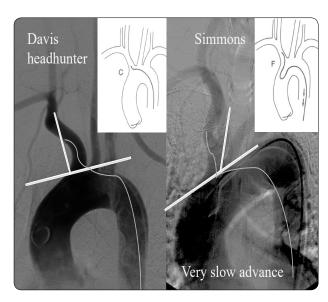


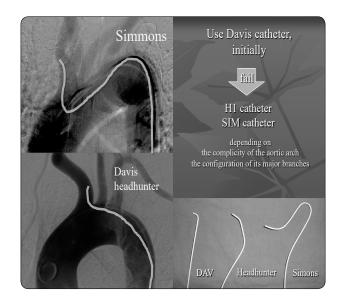


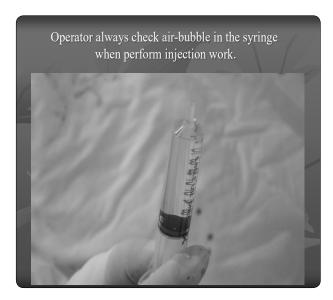


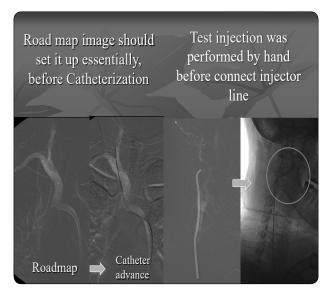


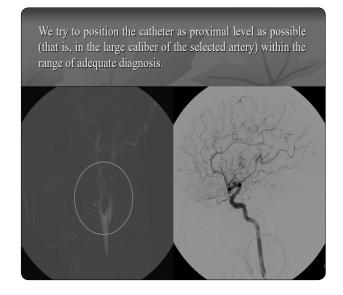

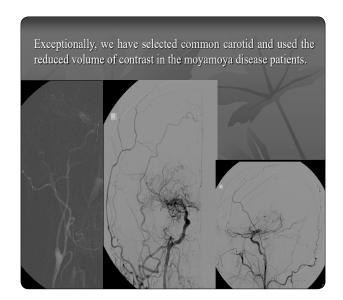

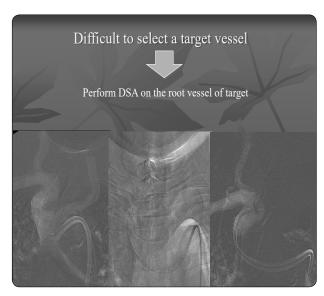

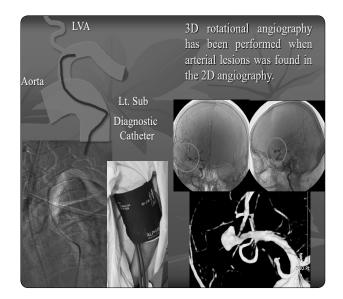

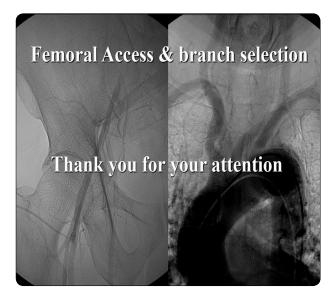

MEMO ///////////////////////////////////

### Closing devices and techniques

유민욱 창원파티마병원



# Vascular Closing Devices 창원파티마병원 신경외과 유민욱

### 지혈 방법의 종류

□ 외부 압박 □ 압박 : Manual compression, C-clamp □ 가압 기구 : SafeGuard, God's hand

지혈 패드 : Chitosan (RBC 응집), Thrombin (PLT 응집)

Active approximation

접착제 기반 : AngioSeal, Leading ExoSeal, Mynx


Passive approximation

 항원파티마병원 CHANGWINI EXTURA UNCOUNTY

### 압박 – Manual compression

- 동맥 천자부위를 압박 (피부 천자 부위 2cm 위)
- 15~20분간 지혈
- 6~8시간 동안 침상 안정
- 지혈 기구 실패 시 다음단 계는 '손으로 압박' 하기
- Manual compression은
   천자부위 지혈의

'Gold standard'

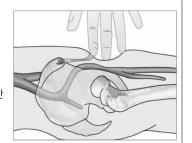



### 압박 - Compression Clamp

• 퇴원 전 천자 부위의 출 혈, 혈종, distal flow, 및 청진 시 잡음 (pseudoaneurysm 및 fistula 등 을 확인하기 위하여) 을 확인함





### 가압 기구 - SafeGuard

- 1회용 공기 압박 기구
- 주사기로 7~40cc의 공기를 주입
- 손으로 누르는 시술자의 힘과 시 간을 줄이는 효과가 있으나, 손으로 누르는 것을 완전히 대체하지 못함
- 장시간의 풍선 압박으로 인한 욕 창을 포함한 합병증의 발생도 보 고 된바 있음





상원파티마병원 CHANGWON EATHAN LICEDITY

### 가압 기구 – God's hand

- SafeGuard와 같은 1회용 공기 압박 기구로, 원리 및 기구의 사용 방법은 유사
- 다만 풍선 내로 공기를 100~150cc 주입하여, 지혈까지 걸리는 압박 시 간 및 침상 안정 시간을 반으로 단축
- 손으로 누르는 것을 완전히 대체하지 못하며 장시간의 풍선 압박이 합병증을 일으킬 수 있음



중의 창원파티마병원 CHANGWON FATIMA HOSPITAL



### 지혈 패드


- ③ PLT의 응집을 촉진 (D-Stat)
- 제품간의 차이는 크지 않으며, 단순히 손으로 눌러서 지혈하는 것보 다 평균적으로 약 3분 가량 시간을 단축 시켰으나 지혈 후 보행까지 걸리는 시간은 단축 시키지 못함
- 지혈 패드 역시 손으로 누르는 것을 완전히 대체하지 못함





### 혈관 지혈 기구 – 배경


- 시술이 점점 더 복잡해 짐에 따라 Larger introducing sheath 사용
- 항 응고제 사용 증가
- Obese한 환자 증가

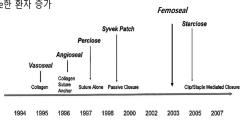

상원파티마병원 CHANGWON FATIMA HOSPITAL

### 혈관 지혈 기구 - 결과

- 높은 성공률
- 지혈시간 단축
- 조기보행

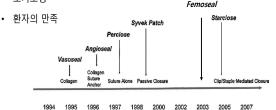

상원파티마병원 CHANGWON FATIMA HOSPITAL

### 혈관 지혈 기구 - 증명

- 30개의 randomized trial에 대한 meta-analysis
  - ① 지혈 시간 : 평균 17분 단축
  - ② 침상 안정 시간 : 10.8시간 감소 (95% CI, 8.5~13.1hrs)
  - ③ 병원 입원 기간 : 0.6일 감소 (95% CI, 0.1~1.1days)

Arterial Puncture Closing Devices Compared With Standard Manual Compression After Cardiac Catheterization Statement Position of Materials Inc.

Maria Korens, Mill.

Contact Annual perform original performs original performs (ACCO) many developed to replace.

Fas. Richaelluller, Mill.

Contact Marian Nakelings, Mill.

Concept originate and no douten bed not foliability generate
concept originates.


Conference or an extra performance or


JAMA. 2004;291:350-357

창원파티마병원 CHANGWON FATIMA HOSPITAL

### 혈관 지혈 기구 - Vasoseal

• 1st FDA approved VCD at 1995

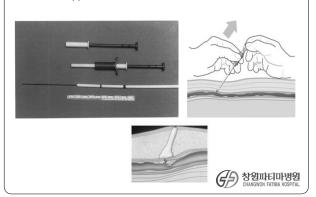

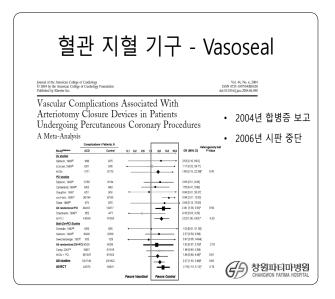




### 봉합 기반 – PerClose (8F 이하)

- PerClose는 천자 부위에서 동맥을 봉합하여 지혈
- 장점
  - ① 매듭이 묶여지고 즉각적으로 막힘
  - ② 다시 동맥 천자가 쉽다
  - ③ 혈관 안으로 남는 물질은 없다
  - ④ Polypropylene monofilament 봉합사 자체의 염증 반응이 적음
- 단점
  - ① 다른 지혈 기구와 비교하여 사용방법이 비교적 복잡



### 봉합 기반 – PerClose (8F 이하)

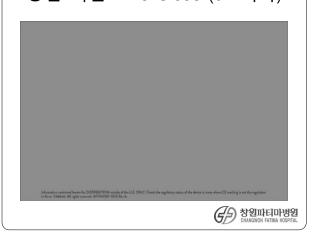

### 봉합 기반 – PerClose (8F 이상)

- 8F 이상의 동맥 천자에서는 두 개의 PerClose®제품을 사용하 여 서로 엇갈리게 봉합하여 지혈
- 최대 21F까지 지혈 가능




### 봉합 기반 – PerClose (8F 이상)



### 클립 기반 - StarClose

- StarClose는 천자 부위를 혈관 밖에서 니켈 합금으로 된 클립을 이용하 여 지혈
- 금속 클립은 3 Tesla MRI 에서도 안전하게 사용 가능
- 장점
  - ① 사용은 빠르고 쉬우며, 보통 48초 이내 사용이 끝남
  - ② 접착제를 사용하는 기구와 비교 시 염증 반응은 작음
- 단점
  - ① 재 천자 시 기존의 클립을 뚫을 수 있고, 이를 다시 StarClose로 지 혈 시, 또 다른 클립과 기존의 클립이 간섭할 수 있는 가능성이 존 재 (이에 대한 안전성 여부는 답보되지 않음)



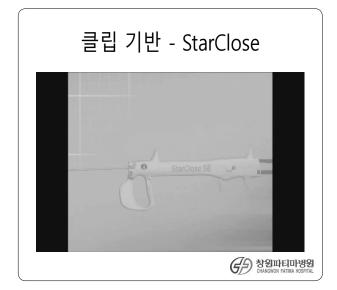

### 디스크 기반 - FemoSeal

- 두 개의 흡수성 디스크를 천자 부위의 안쪽과 바깥쪽에서 붙 여서 지혈
- 디스크는 90일 뒤 가수분해되어 흡수
- 주의
  - ① 사용시 혈관 안쪽으로 디스크가 남기 때문에, 천자 부위 를 통한 조영 시 혈관의 협착이 없는 경우 시행하는 것이 안전
  - ② 한번 디스크가 펼쳐지면, 다시 회수할 수 없다



### 디스크 기반 - FemoSeal



### 접착제 기반 - AngioSeal

- 지혈제가 흡수성 Dexon에 의해 직사각형의 1x2x10mm의 plate에 붙어있는 형태로 이루어져 있다. 천자 부위를 동맥 안에서 흡수성 plate가 anchor 역할도 하고, 밖에서 지혈제가 붙어서 샌드위치처럼 안과 밖에서 눌러서 지혈
- ExoSeal과 다른점
  - ① 대퇴동맥 sheath를 제거한 뒤 시술을 할 수 있음
  - (2) 지혈제로 콜라겐 (PLT 응집 촉진, 면역반응 가능) 을 사용 (60~90일 이내 흡수)
- 장점
  - ① 짧은 learning curve로 쉽게 사용 가능 (미국 기준으로 50% 이상의 시장 점유율)
  - ② Aorta, carotid artery, subclavian artery 같이 다른 혈관 부위 에서도 사용 가능
- 단점
  - ① 혈관 안쪽의 판에 의한 embolus가 발생할 수 있는 가능성이 있으며 5mm 이상 의 혈관에서만 사용하는 것이 추천 강원파티마병원

조 작제 기반 - AngioSeal

• 첫 50case만 넘으면
① 성공률은 빠르게 올라가고
② 실패는 낮아지며
③ 합병증은 적어짐

Predictors of Complications and Learning Curve
Using the Angio-Seal<sup>™</sup> Closure Device Following
Interventional and Diagnostic Catheterization


Benjamin S. Warren, 'Stafford G. Warren,'\* wo, and Scott D. Miller'
Catheterization and Cardiovascular Interventions 48:162-168 (1999)

### 접착제 기반 - AngioSeal



### 접착제 기반 - ExoSeal

- 지혈제는 약 60~90일 이내에 가수분해 되어 흡수
- AngioSeal과 다른점
  - ① 기존의 대퇴동맥 sheath를 제거하지 않고 sheath 안으로 기구를 삽입하여 봉합
  - ② 지혈제로 비 콜라겐 계열인 polyglycolic acid (PGA) 를 사용
- Mynx와 다른점
  - ① 지혈제의 위치를 잡기 위해 Mynx는 풍선을 사용하였으나 ExoSeal 은 금속(nitinol) 와이어 링을 사용하는 점이 다름
  - ② 혈액의 분출과 계기판을 통하여 기구 끝부분의 위치 확인이 가능

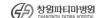

### 접착제 기반 - ExoSeal



### 접착제 기반 - Mynx

- 지혈제로 비 콜라겐 계열인 polyethylene glycol (PEG)를 사용
- 지혈제는 30일 이내 가수분해되어 흡수
- 지혈제의 위치를 잡기 위해서 천자 부위 안쪽에서 걸어주는 anchor으로 풍선을 사용한다.




### 접착제 기반 - Mynx



### 접착제 기반 - MANTA



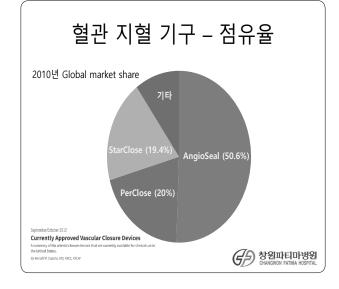

### 혈관 지혈 기구 - 특징

- PerClose
- FemoSeal
- ① 혈관 안쪽에 남는 것이 없 이 지혈
- ① 직관적인 사용법
- ② 사용 방법이 어렵다
- ② 혈관 안쪽으로 디스크가 남음
- StarClose
- AngioSeal
- ① 빠르고 확실한 지혈
- ① 높은 지혈 성공률
- ② Re-puncture가 어렵다
- ② 지혈제로 인한 잠재적 감 염 가능



상원파티마병원

### 혈관 지혈 기구 - 합병증

- 지혈 기구와 손으로 누르는 경우 간에 합병증 발생률의 차이가 이전 보다 나아진 결과를 보여주고 있다.
- 혈관 지혈 기구 사용시 기구에 의한 색전을 제외한다면 손으로 누르 는 경우와 거의 차이가 없다는 보고도 있다.
- 그러나 감염, 폐색, 동정맥루, 및 출혈을 동반하는 가성 동맥류 등은 반복되는 동맥 천자와 연관된 합병증으로 남아있다.

Angiographic Access Site Complications in the Era of Arterial Closure Devices

Shari L. Meyerson, MD, Ted Feldman, MD,\* Tina R. Desai, MD, Jeffrey Leef, MD, Lewis B. Schwartz, MD, and James F. McKinsey, MD, Chicago, IL

Vascular and Endovascular Surgery Volume 36, Number 2, 2002



상원파티마병원

### 혈관 지혈 기구 - 합병증

- 항 응고제를 복용하는 경우, 혈관 지혈 기구 사용 시 합병증 발생률 이 손으로 누르는 경우와 비슷하다는 보고가 많음
- 그러나, 후 복강 내 혈종이나 천자 부위 감염과 같은 경우는 항 응고 제를 복용하는 경우 지혈 기구 사용시 더 많다고 보고되고 있다.
- 대퇴동맥의 경우 약 5% 정도의 환자에게서 5cm 이상의 큰 혈종이 생길 수 있다.
- 천자 시 동맥과 정맥 모두 뚫려 손상이 발생한 경우 동정맥루가 생 길 수 있으며, 초음파를 포함한 검사가 필요할 수 있다.



### 혈관 지혈 기구 – 합병증 분류

- 허혈
- Artery ≤ stenosis
- ② 디스크 기반 혈관 지혈 기구
- 출혈
- ① 고령
- ② 혈관의 석회화
- ③ 기저질환 : ESRD
- ④ In-complete closing : pseudo-aneurysm으로 진행가능
- 혈관 후벽 천자
- 감염
- ① 접착제 기반 혈관 지혈 기구
- ② Re-puncture

상원파티마병원

### 혈관 지혈 기구 – 합병증 위험 요소 ① 나이 (70세 이상) ② 여성 ③ Body Surface Area (BSA) 4 Emergent procedure ⑤ Cr > 2mg/dL 6 Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor (Tirofiban) (Am Heart J 2003;145:1022-9.) (7) Plavix 상원파티마병원 Multi-lesion


### 결론

- 전 세계적으로 모든 동맥 천자 후 약 30~50%는 지혈 기구를 사용하여 지혈되는 것으로 알려져 있다.
- 손으로 눌러서 지혈하는 것과 비교하여 최근에 나오고 있는 지혈기구 는 유의미하게 합병증은 낮아지고 사용자 편리성은 더 높아지고 있다.
- 천자 부위의 직경, 환자의 나이 및 기저 질환, 지혈을 위한 시간적 제약 등이 지혈 기구 사용을 결정하는 중요한 요인
- 많은 지혈 기구가 모두 효과적이며 그 합병증의 발생은 큰 차이를 보이지 않는다.

### 감사합니다

각각의 사진과 동영상에 대한 저작권은 Abbott, Terumo, Cordis, Teleflex 회사에 있습니다.

문의 : a01066941279@gmail.com

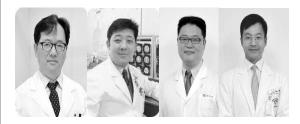

상원파티마병원 CHANGWON FATIMA HOSPITAL

### **Basic NeuroEndovascular Training Course 1**

### (BNET Course)

인 쇄: 2022년 3월 2일

발 행: 2022년 3월 5일

발행처: 대한뇌혈관내치료의학회

(06631) 서울 서초구 서초대로 350 (서초동, 동아빌라트2타운) 407호

Tel\_02-2279-9560 / E-mail\_kones@konesonline.or.kr

https://www.konesonline.or.kr

회 장: 장철훈 부회장: 권순찬 총 무: 김영우

수련교육: 김태곤, 박중철

### InnoSEAL

### INNOVATIONS IN BLOOD TECHNOLOGY

### 보건신기술(NET) 인증 및 미국 FDA, 유럽 CE 인증 획득한 국산 지혈용품



품 목 명: 의료기기 2등급 국소지혈용 드레싱

사용목적: 경피적 천자부위 등 다양한 국소부위의 지혈 및 보호

작용기전: 혈액응집작용 및 지혈 접착막 통한 지혈 촉진



TOTAL SOLUTION PROVIDER IN BLEEDING

## optima<sup>™</sup> coil system

optimal design, optimal detachment

Optima Coil System is manufactured by Balt USA, 29 Parker, Irvine, CA 92618. The Optima Coil System is intended for the endovascular embolization of intracranial aneurysms and other neurovascular abnormalities such as arteriovenous malformations and arteriovenous fistulae. The Optima Coil System is also intended for vascular occlusion of blood vessels within the neurovascular system to permanently obstruct blood flow to an aneurysm or other vascular malformation and for arterial and venous embolizations in the peripheral vasculature. The content of this document, in particular data, information, trademarks and logos are BALT S.A.S and affiliates' sole property. Consequently, all representation and/or reproduction, whether in part or in full, is forbidden and would be considered a violation of BALT S.A.S and affiliates' copyrights and other intellectual proprietary rights © 2018 BALT S.A.S and affiliates all rights reserved. This document with associated pictures are non-contractual and are solely dedicated to healthcare professionals and BALT S.A.S and affiliates' distributors. The products commercialized by BALT S.A.S and affiliates distributors affiliates which have been updated and in University to the boxes. Optima Coil System is Class III CE marked (DQS CE0297) according to the Medical Device Directive 93/42/EEC Annex II Section 4 since July 2017 (535003 W). (05/2018).

